



セラムヴィーナスカレント(コントローラー充電式)

1台 11,000円税込

セラムヴィーナスカレントマスク(専用美容液付き)

1箱(5回分) 11,000円税込

〈お問い合わせ〉

ドクターセラム株式会社 東京都渋谷区道玄坂1-22-8  
☎ 0120-918502 【10:30～16:30(土日、祝日、休業日を除く)】

SERUM VENUS CURRENT

理想に導く  
エステクオリティのスキンケア

美輪郭 ヘルシーなツヤ  
微弱電流パルスがお肌へ多角的にアプローチ  
肌本来の力をサポート

イオン導入  
EMS  
マイクロカレント

Dr.Serum

about Serum Venus Current

セラム ヴィーナスカレント  
3つの作用

マイクロカレント


皮膚に潤い、ツヤを与え  
滑らかな肌に導きます。

EMS

肌を引き締め、  
ハリのあるお肌に導きます。

イオン導入

美容成分を角質層の  
奥深くまで届けます。

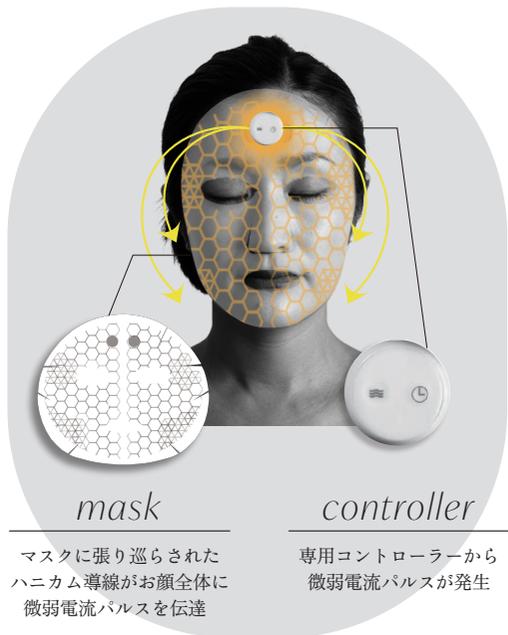

マスクに張り巡らされた  
ハニカム導線がお顔全体に  
微弱電流パルスを送達

専用コントローラーから  
微弱電流パルスが発生

How to use

- マスクに美容液を十分  
含ませます。
- 裏面(印刷無)が肌側  
表面(ハニカム印刷)が外側です。
- クレンジング、洗顔で  
清潔にした肌に密着させます。
- ピッ!と  
鳴ったら  
起動です


コントローラーを起動し(長押し3秒)  
お好みの時間と強さに調整します。
- 装着部

コントローラーの電極を  
マスクの装着部に  
取り付けると作動します。
- ピピッ!と  
鳴ったら  
終了です

コントローラーを外して、  
美容液をきれいに拭きとってください。  
マスクは使い捨てです。
- フィルム内に残った美容液は  
お顔やボディの気になる部分に  
お使いください。



ご使用方法の  
動画はこちら

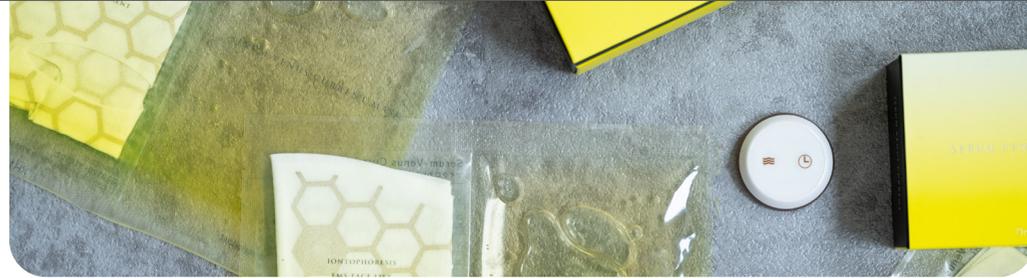

専用美容液の配合成分

3種類のヒト幹細胞上清液

1.

ヒト脂肪間質細胞  
エクソソーム

2.

ヒトサイト血幹細胞  
順化培養液

3.

ヒト線維芽細胞  
順化培養液

年齢を重ねた肌に潤いを与える  
クオリティーの高い国産エイジングケア成分  
3種類のヒト幹細胞培養上清を配合  
※保湿成分

専用美容液に使われている幹細胞培養上清液は、  
管理が徹底的に行き届いた医療機関で生産し  
様々な検査で安全が確認された、  
純国産(日本人由来)の原料が使われています。

純国産  
(日本人由来)  
原料

植物由来の美容成分



《その他の美肌成分》・ヒアルロン酸 Na ・加水分解コラーゲン

※上記は全て保湿成分

- 額にセットしたら  
あとは、待つだけ。  
使用中は両手が  
自由に使えるので、  
ながら美容が可能です。
- 簡単操作で、  
スキんケアの  
時短ができ  
飽きずに  
続けられます。
- パックと美容器が  
一度に体験でき、  
いつもよりリッチで  
特別感のある  
スキんケアに。
- 程よい刺激があり、  
結果にも体感にも  
満足して  
いただけます。

選ばれる理由